



KUBIVENT SoftPlus

Würfel-Matratze mit Softschaum-Auflage

Therapie +
Prophylaxe

Braden
sehr hoch

Dual-
System

Modul-
aufbau

Verstärkte
Randzone

Made
in Handarbeit
Germany

Wirkung

- Schmerz- und druckentlastend
- Wirkt gegen das Schmerzempfinden durch die Spezial-Softschaum-Liegefläche
- Wirkt entlastend – auch auf spezielle Körperbereiche (z.B. bei MS/ALS und Querschnittslähmung) – durch zusätzliche gezielte Würfelenahme
- Bei entsprechenden pflegerischen Maßnahmen unterstützt die Matratze die Therapie bis zum Dekubitus-Stadium IV


Besonders geeignet für Patienten

- bei denen eine maximale Druckentlastung im Vordergrund steht
- mit besonderer Schmerzproblematik
- mit progressivem Krankheitsverlauf
- die durch Vorerkrankungen (z.B. Osteoporose oder Skoliose) besonders gelagert werden müssen, ohne gleichzeitig ihr Körpergefühl zu verlieren
- deren Restmobilität erhalten werden soll
- mit Übergewicht bis zu 350 kg (**SoftPlus 22**)

Komponenten

- Doppelte Kaltschaumschicht (8 bzw. 6 cm) als Liegefläche
- Ein- bzw. zweilagige Würfelschicht (10 bzw. 6 cm) aus bis zu 800 bzw. 1.600 Schaumstoffwürfeln als Mittelschicht
- 4 bzw. 2 cm hohe Trägerschicht aus PU-Schaumstoff
- Verstärkte Randzone

SoftPlus 22

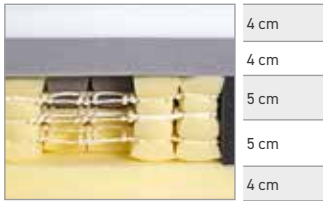

InkoPlus-Bezug
beige

| InkoPlus-Bezug, beige | | |
|-----------------------|---------------|----------------|
| Hilfsmittel-Nr. | 11.29.05.2011 | |
| Größe in cm | € | Bestell-Nr. |
| 190 x 90 x 22 | 2.186,95 | M222-SoftPlus |
| 190 x 100 x 22 | 2.429,94 | M2217-SoftPlus |
| 200 x 90 x 22 | 2.302,58 | M223-SoftPlus |
| 200 x 100 x 22 | 2.558,76 | M224-SoftPlus |
| 200 x 120 x 22 | 3.069,63 | M225-SoftPlus |
| 200 x 140 x 22 | 3.580,50 | M226-SoftPlus |

| Matratzen-Aufbau | | Einsatzbereich | | Testergebnisse | | | |
|------------------|----------------|----------------|---------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Höhe 22 cm | 5 Schichten | 0 – 350 kg | Empfohlen 160 – 350 kg | Bei 80 kg = 58% | Bei 250 kg = 31% | Bei 300 kg = 21% | rF = 79% |
| XXL | | | | | | | |

SoftPlus 18



Trevira-CS-
Spannbezug



Inko-Bezug
geschlossen,
purple

| mit Trevira CS-Spannbezug | | | Inko-Bezug geschlossen, purple | | |
|---------------------------|---------------|----------------|--------------------------------|------------------|--|
| Hilfsmittel-Nr. | 11.29.05.2015 | | 11.29.05.2014 | | |
| Größe in cm | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | |
| 190 x 90 x 18 | 1.594,09 | M182-SoftPlus | 1.594,09 | M182-SoftPlus-I | |
| 190 x 100 x 18 | 1.769,75 | M1817-SoftPlus | 1.769,75 | M1817-SoftPlus-I | |
| 200 x 90 x 18 | 1.677,53 | M183-SoftPlus | 1.677,53 | M183-SoftPlus-I | |
| 200 x 100 x 18 | 1.863,44 | M184-SoftPlus | 1.863,44 | M184-SoftPlus-I | |
| 200 x 120 x 18 | 2.236,72 | M185-SoftPlus | 2.236,72 | M185-SoftPlus-I | |
| 200 x 140 x 18 | 2.609,99 | M186-SoftPlus | 2.609,99 | M186-SoftPlus-I | |

| Matratzen-Aufbau | | Einsatzbereich | | Testergebnisse | | | |
|------------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Höhe 18 cm | 5 Schichten | 0 – 200 kg | Empfohlen 90 – 180 kg | Bei 80 kg = 58% | Bei 160 kg = 30% | Bei 200 kg = 27% | rF = 49% |
| XXL | | | | | | | |

SoftPlus 14



Trevira-CS-
Spannbezug



Inko-Bezug
geschlossen,
purple

| mit Trevira CS-Spannbezug | | | Inko-Bezug geschlossen, purple | | |
|---------------------------|---------------|----------------|--------------------------------|------------------|--|
| Hilfsmittel-Nr. | 11.29.05.2013 | | 11.29.05.2012 | | |
| Größe in cm | € | Bestell-Nr. | € | Bestell-Nr. | |
| 190 x 90 x 14 | 1.165,20 | M142-SoftPlus | 1.165,20 | M142-SoftPlus-I | |
| 190 x 100 x 14 | 1.294,02 | M1417-SoftPlus | 1.294,02 | M1417-SoftPlus-I | |
| 200 x 90 x 14 | 1.226,69 | M143-SoftPlus | 1.226,69 | M143-SoftPlus-I | |
| 200 x 100 x 14 | 1.362,82 | M144-SoftPlus | 1.362,82 | M144-SoftPlus-I | |
| 200 x 120 x 14 | 1.635,09 | M145-SoftPlus | 1.635,09 | M145-SoftPlus-I | |
| 200 x 140 x 14 | 1.907,35 | M146-SoftPlus | 1.907,35 | M146-SoftPlus-I | |

| Matratzen-Aufbau | | Einsatzbereich | | Testergebnisse | | |
|------------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| Höhe 14 cm | 4 Schichten | 0 – 120 kg | Empfohlen 70 – 100 kg | Bei 80 kg = 51% | Bei 120 kg = 44% | rF = 52% |